


PER LE LAME RIUTILIZZABILI DEL SISTEMA GLIDESCOPE TITANIUM

Quando si utilizzano le lame riutilizzabili Titanium, installare il cavo video GlideScope dotato di due connettori circolari in plastica (vedi FIGURA 1).




1. COLLEGARE IL CAVO VIDEO AL MONITOR E ALLA LAMA

- Scegliere il video laringoscopio GlideScope (lama) più adatto per il paziente.
- Per collegare il cavo video alla porta situata sul retro del monitor, allineare la freccia sul cavo video alla freccia sulla porta e inserire il cavo (vedi FIGURA 2). Il cavo sarà collegato correttamente quando si udirà un "clic".
- Per collegare l'altra estremità del cavo video alla lama, allineare la freccia sul cavo video alla freccia sulla lama e inserire il cavo. Il cavo sarà collegato correttamente quando si udirà un "clic".

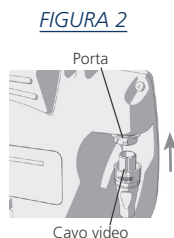

2. PREPARARE IL SISTEMA GLIDESCOPE

- Accendere il sistema premendo il pulsante di accensione (vedi FIGURA 3).
- Assicurarsi che il sistema funzioni correttamente verificando che l'immagine visualizzata sul monitor provenga dalla videocamera del video laringoscopio (lama). È possibile che una piccola parte della lama venga visualizzata nell'angolo superiore sinistro nella parte superiore dello schermo.
- Se necessario, attendere da 30 a 120 secondi per consentire al meccanismo anti-appannamento GlideScope Reveal™ di entrare completamente in funzione.

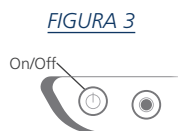

PER L'INSTALLAZIONE DELLE LAME MONOUSO DEL SISTEMA TITANIUM, VEDI RETRO.

PER LE LAME MONOUSO DEL SISTEMA GLIDESCOPE TITANIUM


Quando si utilizzano le lame monouso Titanium, installare il cavo smart GlideScope dotato di un connettore circolare in plastica e uno in metallo (vedi FIGURA 1).



1. COLLEGARE IL CAVO SMART AL MONITOR E ALLA LAMA

- Scegliere il video laringoscopio GlideScope (lama) più adatto per il paziente.
- Per collegare il cavo smart alla porta situata sul retro del monitor, allineare la freccia sul connettore in plastica del cavo smart alla freccia sulla porta e inserire il cavo (vedi FIGURA 2). Il cavo sarà collegato correttamente quando si udirà un "clic".
- Per collegare l'altra estremità del cavo smart alla lama, allineare la freccia sul connettore in metallo del cavo smart alla freccia sulla lama e inserire il cavo.

FIGURA 2

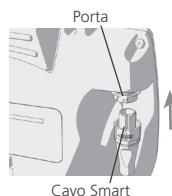

2. PREPARARE IL SISTEMA GLIDESCOPE

- Accendere il sistema premendo il pulsante di accensione (vedi FIGURA 3).
- Assicurarsi che il sistema funzioni correttamente verificando che l'immagine visualizzata sul monitor provenga dalla videocamera del video laringoscopio (lama). È possibile che una piccola parte della lama venga visualizzata nell'angolo superiore sinistro nella parte superiore dello schermo.
- In caso di appannamento, attendere da 30 a 120 secondi per consentire al LED di entrare completamente in funzione.

FIGURA 3

